



قوة دفاع البحرين
الخدمات الطبية الملكية
المستشفى العسكري

ماهو أنبوب تفريغ السوائل:

هو عبارة عن أنبوب يدخل عن طريق الجلد ويثبت بالقرب من مكان العملية الجراحية ويتم تثبيته بواسطة غرز.

كيفية تغيير الجرح:

قم بالإتصال بطبيبك أو بالجناح إذا لاحظت الأمور التالية:


- ظهور رائحة غير مستحبة.
- وجود احمرار , انتفاخ أو تسرب حول الأنبوب.
- ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية.
- عدم وجود سوائل في العبوة.
- إذا كانت العبوة مفرغة من الهواء.
- إذا انسحبت العبوة من مكانها.
- في حال انفصال الأنبوب عن الوصلة الخضراء / أو الوصلة البيضاء يمكن إعادة تركيبه و وضع لاصق عليه.

- غسل اليدين بالماء والصابون.
- قم بإزالة اللاصق القديم الموجود على الجرح إذا كان متسخاً أو رطباً و ضع لاصق جديد.
- تأكد من أن وضع الأنبوب آمناً.

كيفية تفريغ وقياس السوائل؟

- الرجاء احضار كأس قياسي ومحقنة لتجميع وقياس السوائل.
- اغسل يديك بالماء و الصابون.
- قم بإغلاق الأنبوب بإحكام وذلك عن طريق ضغط القفل الموجود على الأنبوب بالكامل وإبعاده عن ملاسك.
- قم بفصل الأنبوب عن العبوة.
- قم بإفراغ العبوة بالكامل عن طريق قلبها رأساً على عقب والضغط عليها.
- اضغط على العبوة بأحدى يديك لإخراج الهواء منها بالكامل واستخدم يدك الأخرى لتوصيل العبوة بالأنبوب.
- قم بفتح القفل.
- سجل كمية السوائل التي قمت بإفراغها في الجدول المرفق وإذا كان لديك عبوتين قم بترقيمهما (1 & 2).
- اغسل الكأس بالماء و الصابون وجففه لإعادة استخدامه مرة أخرى.
- اغسل يدك بالماء والصابون.
- الرجاء أخذ الجدول معك عندما تقوم بزيارة طبيبك.

كيفية العناية بأنبوب تفريغ السوائل

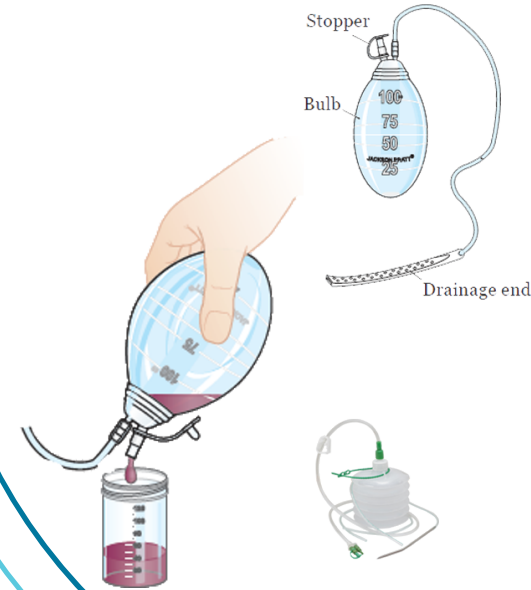

جدول القياسات / Measuring Chart


التاريخ Date	اليمن Rt Redivac	اليسار Lt Redivac

إعداد: قسم الجراحة
هاتف: 17766943 - 17766643
2020



Bahrain Defence Force
Royal Medical Services
Military Hospital

HOME CARE FOR REDI-VAC

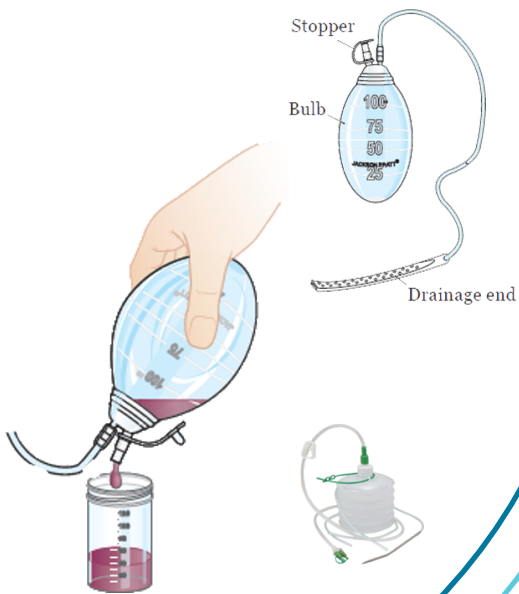

WHAT IS REDI-VAC

Redivac is a drainage tube it is threaded through the skin in to the wound near the surgical incision and is held in place by stitches.

HOW TO CHANGE THE DRESSING AND CARE OF THE DRAIN?

- Wash your hands with warm water and soap.
- If the dressing is wet or dirty remove the old dressing and apply another dry dressing (mepore).
- Ensure the drain is secure.

HOW TO EMPTY AND MEASURE THE WOUND DRAIN?

Please complete the following steps when you empty the drain:

- Obtain a measuring cup and syringe to collect fluid.
- Wash your hands with warm water and soap.
- Unfasten the bulb from your clothing.
- Clamp the drain.
- Remove the stopper from the bulb.
- Completely empty the bulb by turning the bulb upside down.
- Squeeze the fluid into a measuring cup.

- Use one hand to squeeze all the air from the bulb. with the bulb squeezed together use your other hand to replace the stopper.
- Release the calmp.
- Fasten the bulb to your clothing or dressing to avoid pulling it to out accidentally.
- Write down the amount of emptied fluid on the measuring chart provided below.
- Empty the measuring cup. If the cup is to be reused wash it with soap and water and rinse.
- Wash your hands with soap and water.
- Take this to your doctor with each visit.

CONSULT YOUR DOCTOR OR NURSE

- If any foul smell.
- Any redness, swelling or leaking around the tube.
- No fluid in the collection container.
- Fever more than 38C.
- The drain pulls out from your skin.
- Sever pain around the drain or in the site.
- No vacuum in the R-vac.
- If the tube disconnected accidentally, reconnect it to green rubber/ or to the tube and apply tape.